

Компьютерный кардиограф



Валента®
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКГК-02

Компьютерный электрокардиограф Валента ЭКГК-02 обеспечивает синхронный съем ЭКГ в 12 отведениях и 40 сек по II отведению для анализа ритма

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО USB

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА


**УНИКАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ
СИНДРОМАЛЬНОГО АНАЛИЗА**

Отведений, синхронно регистрируемых	12
Размеры	140x62x30 мм
Вес	180 г
Частота дискретизации	2000 Гц
Диапазон частот	0,05-150 Гц
Подавление синфазной помехи	100 дБ
Защита от импульса дефибриллятора	есть
Подключение к компьютеру	USB



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Компьютерная обработка

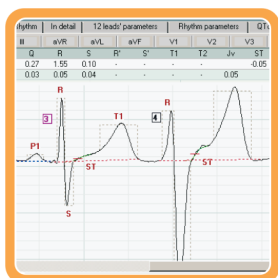


- Распознавание и измерение элементов ЭКГ
- Автоматическая интерпретация
- Текстовое компьютерное заключение формируется на базе более чем 120 элементарных формулировок по различным синдромам

Сравнение исследований в динамике



Врачебный анализ

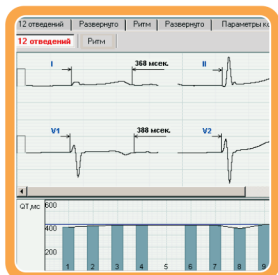

- Сравнение в динамике текущей ЭКГ с любой зарегистрированной ранее
- Анализ дисперсии QT по диаграммам разброса и расчету параметров по каждому отведению
- Анализ всех параметров ЭКГ, в т.ч. таблиц кодов форм зубцов